


Kurzanleitung zur Installation beim Heimanwender



- Wählen Sie das SDM "Home Profile" in V-STATS™ aus
- Verbinden Sie den Trenntransformator mit dem Netzkabel
- Verbinden Sie Trenntransformator und SDM
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose

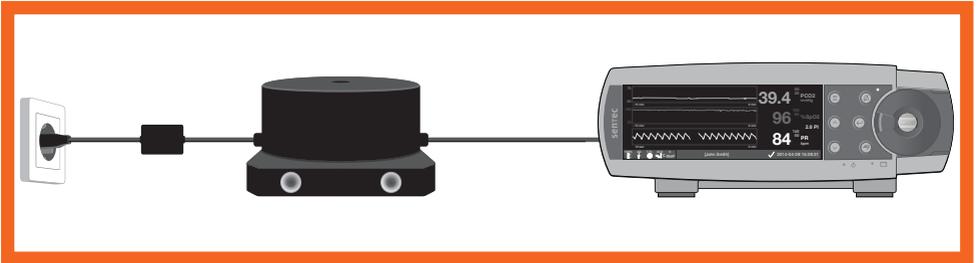

Weitere Informationen finden Sie in "SDMS - Installation beim Heimanwender durch unterwiesene Person" (HB-011332).



www.sentec.com/ifu



Sentec AG
Ringstrasse 39
CH-4106 Therwil
Switzerland
www.sentec.com

HB-011470_
Erscheinungsdatum: 03/2021



CE
0123

Care with
Confidence